

Meso BioMatrix[®]

Acellular Peritoneum Matrix

by  DSM



SEBBIN PARIS
ESTHETIQUE & RECONSTRUCTION

Recrear cuerpos en armonía para un nuevo renacer.

DESCRIPCIÓN

Meso BioMatrix® es una matriz acelular extraída del peritoneo porcino. El tratamiento OPTRIX™ aplicado al tejido lo desinfecta, inactiva los virus y elimina las células, al tiempo que conserva los componentes de la matriz extracelular.* Elegido por su resistencia natural, su elasticidad, su flexibilidad y su porosidad hacen que la matriz Meso BioMatrix® sea particularmente adecuada para procedimientos quirúrgicos en reconstrucción mamaria.

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

Ideal para reconstrucción mamaria


- Suave, flexible, adaptable, extensible
- Fácil de suturar y de moldear
- Refuerza los tejidos blandos y disimula el “ripling” del implante¹

El tratamiento OPTRIX™ conserva la estructura natural y los componentes* de la matriz extracelular


- Integración rápida y limitación de la inflamación¹
- Su estructura abierta porosa proporciona el andamiaje para la proliferación celular y la neovascularización
- Resistencia y longevidad excelentes y sin reticulación
- Conservación de los factores de crecimiento naturales y de los glicosaminoglicanos²
- Elimina el ADN y los antígenos^{1,2}

Listo para usar

- Sin conservantes ni estabilizantes que haya que enjuagar
- Hidratación rápida en el suero fisiológico o fluidos autólogos
- Se almacena a temperatura ambiente y tiene una caducidad de 2 años

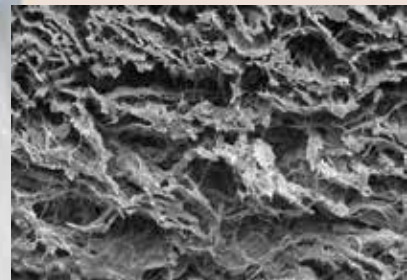

Meso BioMatrix® Imagen SEM a 500X

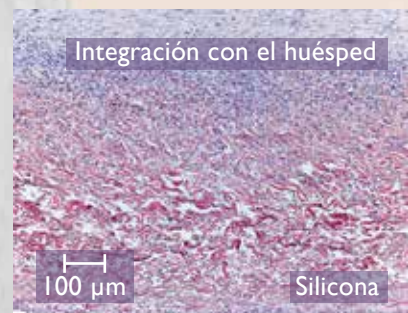

Estudio subcutáneo en conejos. Implantación de Meso BioMatrix® en un envoltorio de expansor de silicona. Coloración HE y aumento 10 veces. Resultados 4 semanas después de la implantación.

Referencia	Dimensiones	Acondicionamiento
30055-04	6 cm x 16 cm	Unitario estéril
30055-05	8 cm x 16 cm	Unitario estéril
30055-06	10 cm x 16 cm	Unitario estéril

Este documento está reservado a los profesionales de la salud. Según la Directiva relativa a productos sanitarios 93/42/CEE, Meso BioMatrix® es un dispositivo médico de clase III. Lo fabrica DSM Biomédical y lo distribuye el Groupe Sebbin. Meso BioMatrix® está destinado a su implantación en la mama para mejorar la estética de la cirugía en los procedimientos de aumento o de reconstrucción de los tejidos blandos. Este producto tiene el marcado CE conforme al organismo notificado BSI, número 0086. Le rogamos que lea con atención el manual de instrucciones antes de utilizar este producto.

*No se ha estudiado en el ámbito médico el efecto de estas constataciones en los resultados de Meso BioMatrix®.

**Lea más detalles en el manual de instrucciones.

(1) Datos internos de DSM Biomédical. Los resultados de las pruebas in vitro no son indicativas necesariamente de los resultados clínicos.

(2) BioMaterials. 2010 Sep;31(27):6934-40.

Meso BioMatrix® y OPTRIX™ son marcas registradas de DSM o de sus filiales.

DISTRIBUIDOR:

SEBBIN PARIS
ESTHETIQUE & RECONSTRUCTION

GROUPE SEBBIN SAS
39, Parc d'Activités des Quatre Vents
95650 Boissy l'Aillierie - France
Tel.: +33 1 34 42 13 28
Fax: +33 1 34 42 16 88
www.sebbin.com

OPERACIONES INTERNACIONALES:

Sebbin Benelux SPRL:

Tel.: +32 3 451 26 81 - Fax: +32 3 451 26 89

Email: info@laboratoires-sebbin.be

Sebbin Deutschland GmbH:

Tel.: +49 2102 70 88 00 0 - Fax: +49 2102 70 88 00 99

Email: service@sebbin-implantate.de

Groupe Sebbin SAS, France:

Tel.: +33 1 34 42 13 28 - Fax: +33 1 34 42 16 88

Email: serviceclients@laboratoires-sebbin.fr

Sebbin Iberica Productos Medicos, S.L.:

Tel.: +34 93 159 3003 - Fax: +34 93 676 3053

Email: info@sebbin.es

Sebbin Suisse Sarl:

Tel.: +41 43 336 72 30 - Fax: +41 43 336 72 36

Email: info@sebbin.ch

Sebbin UK Ltd:

Tel.: 0800 652 4028 - Fax: +4433 0088 9575

Email: custserv@sebbin.uk